

SenSura[®] Mio Convex Flip 1-dels tömbar

Böjd passform för utbuktade områden

SenSura[®] Mio Convex Flip



Det finns en SenSura[®] Mio för varje kropp


SenSura[®] Mio Convex Flip

SenSura Mio Convex Flip är det första stomibandaget framtaget för att passa utbuktade kroppsprofiler som t ex bröst.

En **böjd stjärnformad basplatta** med flikar omfamnar kroppen och ger färre veck och rynkor.

En **stabiliseringsring** stabiliserar mittendelen så att stomin får det stöd den behöver.

Flexzoner i mitten och i kanterna maximerar passform och flexibilitet vid rörelser.

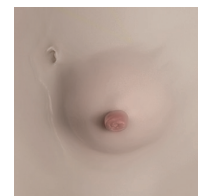

Utbuktad kroppsprofil

Diskretion med ett personligt utseende och känsla

Elastisk häfta - Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning.

Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

Cirkelfilter - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning med upp till 61%* samt renar gas/odör från stomin.

Inspektionslucka - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)

1-dels tömbar Convex Flip

Neutralt grå	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*10-40 mm <	S	738289	182000	10	60 ml
Midi	*10-40 mm <	S	738290	182010	10	342 ml
	*10-50 mm <	M	738293	182100	10	342 ml
	*25-50 mm	M	738294	182120	10	342 ml
	*30-50 mm	M	738295	182130	10	342 ml
	*35-50 mm	M	738296	182140	10	342 ml
Maxi	*10-40 mm <	S	738291	182020	10	470 ml
	10-40 mm <	S	738292	182030	10	470 ml
	*10-50 mm <	M	738297	182200	10	470 ml
	10-50 mm <	M	738301	182240	10	470 ml
	*10-60 mm <	L	738302	182300	10	470 ml
	10-60 mm <	L	738304	182320	10	470 ml
	*25-50 mm	M	738298	182210	10	470 ml
	*30-50 mm	M	738299	182220	10	470 ml
	*35-50 mm	M	738300	182230	10	470 ml
*40-60 mm	L	738303	182310	10	470 ml	



Klar	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	10-60 mm <	L	738305	182350	10	470 ml