

# SenSura<sup>®</sup> Mio 1-dels tömbar

Passar bra. Känns bra

*SenSura<sup>®</sup> Mio*



# Den elastiska häftan passar alla kroppsformer



## Passar säkert och följer kroppens naturliga rörelser

Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning mot t.ex. bråck, ärr och hudveck. Den elastiska häftan följer magens form och anpassar sig när du böjer dig och sträcker dig.

**Elastisk häfta** - Den elastiska platta häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning. Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

**Neutralt grått tyg** - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

**Cirkelfilter** - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning med upp till 61%\* samt renar gas/odör från stomin.

**Inspektionslucka** - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.

**Borttagning av produkten** - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

**Bältesöron:** Alla SenSura Mio Convex produkter har bältesöron.

\* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)

## SenSura® Mio 1-dels tömbar påse


Neutralt grå	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*10-45 mm ×	734460	104010	30	220 ml
	10-45 mm ×	734469	104060	30	220 ml
Midi	*10-45 mm ×	734461	104110	30	420 ml
	10-45 mm ×	734470	104160	30	420 ml
	*25 mm	734462	104120	30	420 ml
	*30 mm	734463	104130	30	420 ml
	*35 mm	734464	104140	30	420 ml
Maxi	*10-55 mm ×	734465	104210	30	650 ml
	10-55 mm ×	734471	104260	30	650 ml
	*30 mm	734466	104220	30	650 ml
	*35 mm	734467	104230	30	650 ml
	*40 mm	734468	104240	30	650 ml

\* Med lucka för inspektion

Klar	Hålstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	10-55 mm ×	734472	104280	30	650 ml



SenSura Mio 1-dels tömbar påse

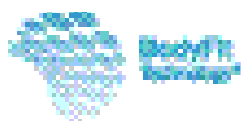

### BodyFit Technology®

SenSura Mio är baserad på BodyFit Technology. Genom att ha den individuella kroppen i åtanke när vi designar, utvecklar vi lösningar som passar säkert till individuella kroppsformer och livsstilar.