
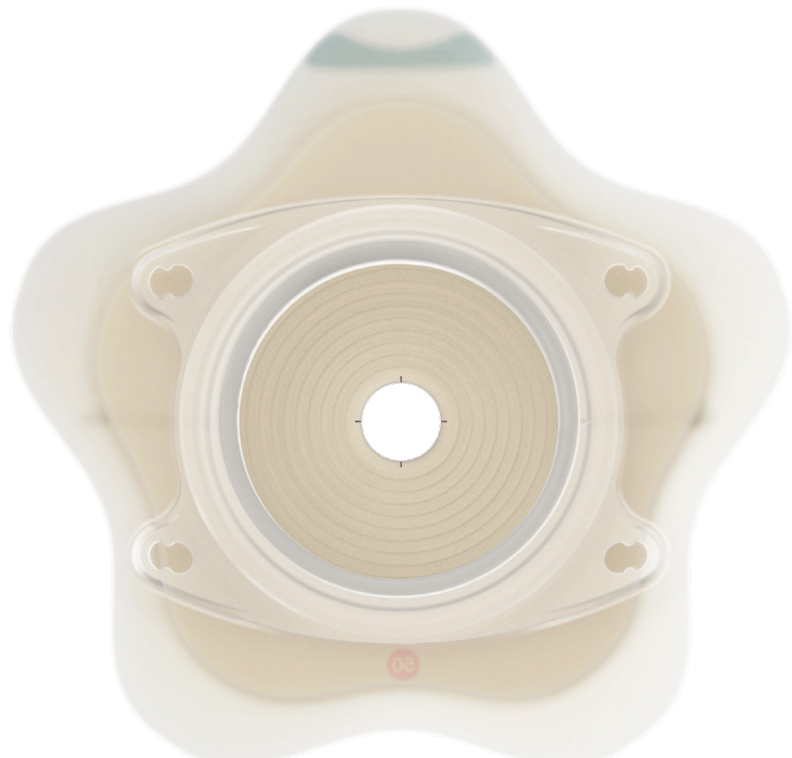


SenSura[®] Mio Convex Flip Click 2-dels

Böjd passform för utbuktade områden

SenSura[®] Mio Convex Flip

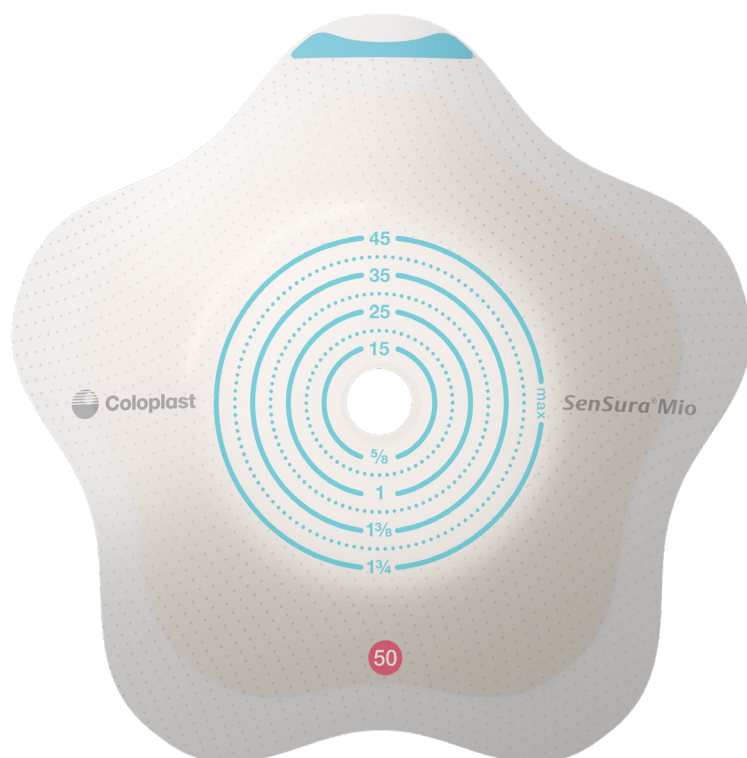

Det finns en SenSura[®] Mio för varje kropp

SenSura[®] Mio Convex Flip

SenSura Mio Convex Flip är det första stomibandaget framtaget för att passa utbuktade kroppsprofiler som t ex bröst.

En **böjd stjärnformad basplatta** med flikar omfamnar kroppen och ger färre veck och rynkor.

En **stabiliseringsring** stabiliserar mittendelen så att stomin får det stöd den behöver.

Flexzoner i mitten och i kanterna maximerar passform och flexibilitet vid rörelser.



Elastisk häfta - Den elastiska platta häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning.

Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr.

Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg.

Cirkelfilter - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning med upp till 61%* samt renar gas/odör från stomin.

Inspektionslucka - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.


Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt mot huden med den andra handen.

Bältesöron: Alla SenSura Mio Convex produkter har bältesöron.

* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)

2-dels Click basplatta Convex Flip

	Ringstorlek	Hålstorlek	Skalstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp
Uppklippbar	40 mm	10-35 mm ✕	S	738260	185000	5
	50 mm	10-45 mm ✕	M	738262	185100	5
	60 mm	10-55 mm ✕	L	738266	185200	5
	70 mm	10-65 mm ✕	XL	738271	185300	5
Förstansat hål	40 mm	20-35 mm	S	738261	185010	5
	50 mm	25-45 mm	M	738263	185110	5
	50 mm	30-45 mm	M	738264	185120	5
	50 mm	35-45 mm	M	738265	185130	5
	60 mm	30-55 mm	L	738267	185210	5
	60 mm	35-55 mm	L	738268	185220	5
	60 mm	40-55 mm	L	738269	185230	5
	60 mm	45-55 mm	L	738270	185240	5
	70 mm	45-65 mm	XL	738272	185310	5
	70 mm	50-65 mm	XL	738273	185320	5

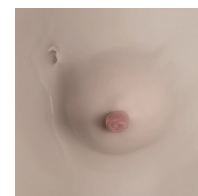

Utbuktad kroppsprofil

BodyFit Technology[®]

SenSura Mio är baserad på BodyFit Technology. Genom att ha den individuella kroppen i åtanke när vi designar, utvecklar vi lösningar som passar säkert till individuella kroppsformer och livsstilar.



2-dels Click sluten

Neutralt grå	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*50 mm	734504	112110	30	100 ml
Midi	*40 mm	734502	112010	30	340 ml
	*50 mm	734505	112120	30	340 ml
	*60 mm	734507	112210	30	340 ml
Maxi	*40 mm	734503	112020	30	550 ml
	*50 mm	734506	112130	30	550 ml
	*60 mm	734508	112220	30	550 ml
	*70 mm	734509	112250	30	490 ml



2-dels Click tömbar

Neutralt grå	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Mini	*50 mm	734524	112410	30	200 ml
Midi	*40 mm	734520	112310	30	420 ml
	*50 mm	734525	112420	30	420 ml
	*60 mm	734527	112510	30	420 ml
Maxi	*40 mm	734521	112320	30	650 ml
	40 mm	734523	112340	30	650 ml
	*50 mm	734526	112430	30	650 ml
	50 mm	735160	112450	30	650 ml
	*60 mm	734528	112520	30	650 ml
	60 mm	734530	112540	30	650 ml
	*70 mm	734531	112610	30	510 ml
	70 mm	734533	112630	30	510 ml



* Med lucka för inspektion

Klar	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	40 mm	734522	112330	30	650 ml
	60 mm	734529	112530	30	650 ml



2-dels Click urostomipåse

Neutralt grå	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Midi	50 mm	734542	114960	30	380 ml
Maxi	40 mm	734540	114910	30	550 ml
	50 mm	734543	114970	30	480 ml
	60 mm	738072	114990	30	448 ml



Klar	Ringstorlek	Apoteksvarunr	Artikelnr	Styck/fp	Volym
Maxi	40 mm	734541	114920	30	550 ml
	50 mm	734544	114980	30	480 ml